

Bruksanvisning **Hannah**



MAYDAY AID


KayserBetten
Pflegebetten für Kinder

Denna bruksanvisning ger information om montering, öppning och stängning av grindarna, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sängen Hannah.

Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av sängen Hannah.

Innehållsförteckning

Användningsområde	3
Produktansvar och säkerhet	4
Garanti och hållbarhet	4
Service och reparationer	4
Monteringsanvisning	5
Anvisningar för att öppna grindarna	12
Anvisningar för att stänga grindarna	13
Tekniska specifikationer	14
Skötselråd för inkontinensöverdrag till madrassen	14

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 33 B
434 39 KUNGSBACKA

Tel. 0300-56 97 00

Fax: 0300-56 97 01

info@maydayaid.se

www.maydayaid.se

Användningsområde

Sängen Hannah är en säker säng med spjälsidor som gör att aktiva barn och vuxna med särskilda behov kan sova tryggt på natten. Sängen kan även användas som lekplats under dagen.

Grindarna har en låsanordning som gör det omöjligt för brukaren att öppna dem från insidan. Sängen är byggd av massivt trä med rejäla spjälor för att minimera olycksrisken.

Hannah finns att beställa i ett flertal utföranden, exempelvis med sidor av plexiglas för att underlätta kontakten med personen som är i sängen. Plexiglas kan även vara en fördel om personen i sängen vill kunna titta på tv. Som tillbehör kan beställas hjul som gör sängen enkel att flytta. Hjuln är låsbara.

Hannah finns i storlekarna 90 x 170 cm, 90 x 200 cm och 100 x 200 cm. Spjälsidorna finns i fyra höjder 70 cm, 98 cm, 135 cm och 170 cm. (Hannah 170 finns ej i storlek 90 x 170 cm.)

Hannah tål en max brukarvikt på 150 kg.

Montering av sängen görs lämpligen av tre personer. Monteringsanvisning finns på sidorna 5-11 i denna bruksanvisning.

Produktansvar och säkerhet

Sängen Hannah är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Hannah uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Sängen Hannah har 2 års garanti. Garanti gäller då sängen förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Hannah skall endast utföras av behörig personal som t ex hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget MAYDAY AID AB.

Monteringsanvisning

1. Öppna alla lådor och packa upp samtliga delar. Släng direkt allt förpackningsmaterial, eftersom det kan utgöra kvävningsrisk.

2. Sortera och kontrollera att antalet skruvar och monteringsstillbehör stämmer med detaljspecifikationen som medföljer sängen.

3. Börja med att skruva fast hjulen på gavlarna, om sängen beställts med hjul.

Först måste hjulet lossas från hjulhuset.

Muttrarna i gaffeln skruvas därefter loss med en fast nyckel 10 mm.

Montera sedan hjulhuset i gavelns undersida i det förborrade hålet med en insexnyckel 8 mm (bild 3.1).

Skruva sist fast hjulet i gaffeln igen (bild 3.2).

Lås hjulen så att gavlarna blir lättare att hantera under resten av monteringen.



Bild 3.1



Bild 3.2

4. Sätt fast knopparna på gavelstolparnas ovansida innan gaveln reses upp (gäller framför allt grindstorlek 170, där monteringen kan vara svår att utföra på grund av närheten till taket när sängen är färdigbyggd).

Träpluggarna passas in i de förborrade hålen.

Använd eventuellt träklubba för att få knopparna ordentligt på plats.

5. Skruva fast skruvhattar på sex långa skruvar.

Trä igenom de långa skruvarna i de genomgående hålen, tre skruvar i varje gavelben (bild 5.1).

Gavelsidan med flest förborrade hål ska vara gavelns utsida och den sida som skruvhattarna ska sitta mot (bild 5.2).

Gavelsidan med minst antal förborrade hål (bara genomborrade hål), ska vara gavelns insida (bild 5.3).

Gavelbenet med tre förborrade hål ska vara mot sängens framsida, där dörrarna ska monteras (bild 5.4).



Bild 5.1



Bild 5.2



Bild 5.3



Bild 5.4

6. Observera att inga skruvar ska dras åt hårt innan sängen är helt färdigmonterad.

7. Montera fast den nedre delen av det bakre sidostycket (A- bild 7.1 och 7.2) mot gaveln.

För in en bult med tvärgående gängat hål (D- bild 7.3) i det förborrade hålet undertill på det bakre sidostycket. Se till att det tvärgående hålet i bulten hamnar mot det förborrade hålet i det bakre sidostyckets kortända, så att det kan fästas mot gaveln med den långa skruven (bild 7.4).



Bild 7.1



Bild 7.2

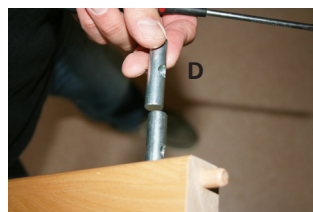


Bild 7.3



Bild 7.4

8. Den mellersta delen av det bakre sidostycket (B- bild 7.1 och 8.1) monteras på samma sätt som i punkt 7, med två bultar (D) och två långa skruvar.

För in båda bultarna (D) i det förborrade hålet undertill på det mellersta sidostycket (bild 7.3). Se till att det tvärgående hålet i bulten hamnar mot det förborrade hålet i det bakre sidostyckets kortända, så att det kan fästas mot gaveln med de två långa skruvarna.

Den översta delen av det bakre sidostyckets mellersta del (B) fästes i gaveln med en kort skruv med skruvhatt.

9. Lyft den övre delen av det bakre sidostycket (C- bild 9.1 & 7.1) på plats. Sidan med korta spjälor ska vara överst.

Spåret i den övre delen (C) ska passas in i skenan i den mellersta delen (B) (bild 7.1). Fäst den övre delen (C) med bultar (D) och långa skruvar i över- och nederkant, på samma sätt som i punkt 7.



Bild 8.1

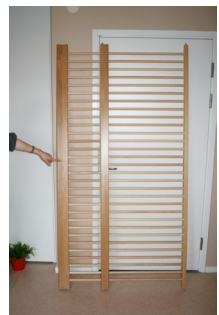


Bild 9.1

10. Montera den urfasade delen av det främre sidostycket (E- bild 10.1) mot samma gavel som det bakre sidostycket monterats på. Den urfasade delen ska vara nedåt och skåran uppåt. Montera på samma sätt som i punkt 7 med en bult (D) och en lång skruv.

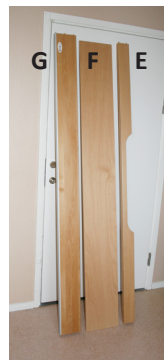


Bild 10.1

11. Passa in den tunna breda delen (F- bild 10.1) av det främre sidostycket på den urfasade delen (E).

12. Skruva i långa skruvar utan skruvhattar med bultar (D), så som beskrivits i punkt 7, i båda kortändarna på den övre delen (G- bild 10.1) av det främre sidostycket med metallskåra (där grindarna ska löpa).

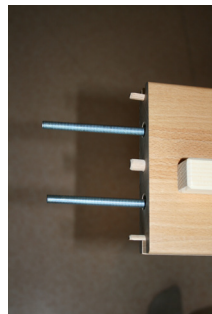


Bild 12.1

13. Fäst den övre delen (G) mot gaveln genom att skjuta den på plats med den mellersta delen (F) inpassad i den undre skåran (utan metall). Passa in de förmonterade träpluggarna i gaveln så att de långa skruvarna går igenom de förborrade hålen och skruva sedan fast skruvhattarna på de långa skruvarna på gavelns utsida.



Bild 13.1

14. Montera fast den överliggande balken högst upp på gaveln. Denna balk stabiliserar sänggramen och grindarna när dessa är stängda.

15. Lyft den andra gaveln på plats så att alla skruvar och pluggar i de främre och bakre sidostyckena (A,B,C,E,F,G) går in i respektive hål i gaveln.

Skruva fast skruvhattar på alla skruvar som är förmonterade.



Bild 15.1

Skruva i bultar (D) och långa alternativt korta skruvar i de skruvhål som återstår (motsvarande hur de är placerade i den färdigmonterade gaveln).

16. Grindarna monteras genom att de först skjuts på plats i metallskenan i det övre främre sidostycket (G) (bild 16.1).

Grindarnas ändparti skruvas fast med små skruvar i de förborrade hålen i gavelbenet (bild 5.4 och 15.6).



Bild 16.1

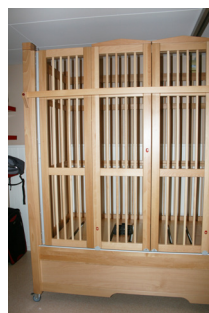


Bild 16.2

17. Gå över samtliga skruvar och skruvhattar i den monterade sängramen och dra åt dem hårt så att sängen blir helt stabil.

18. Lägg alla ribborna som ska utgöra sängbotten på plats.

Skruva fast dem med de medföljande skruvarna (ligger i samma förpackning som ribborna) (bild 18.1).

Använd skruvdragare och se till att alla skruvar skruvas ned ordentligt i försänkningarna.



Bild 18.1

19. Montera de två konsollerna med röda knappar på gavelbenens framsida med två små skruvar.

Konsollerna ska hålla den tvärgående låsbalken på plats när grindarna är stängda.

20. Dra på inkontinensskyddet på madrassen, om sådant beställts.

Lägg madrassen på plats i sängen.

21. Läs anvisningarna för hur grindarna öppnas och stängs innan sängen tas i bruk, så att detta moment kan utföras på ett säkert sätt.

Anvisningar för att öppna grindarna

22. Dra ut de röda knapparna i konsollerna på gavelbenen för att frigöra den tvärgående låsbalken (H- bild 22.1).

Lyft ur låsbalken genom att lyfta den uppåt och vinkla den utåt (bild 22.1).

Skjut den röda låsenheten I (bild 22.1 och 22.2) åt vänster och den röda låsenheten J (bild 22.2) nedåt samtidigt för att öppna låset mellan grindarna.

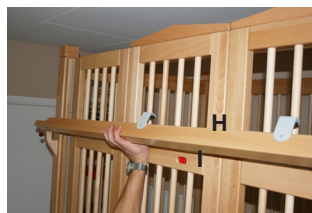


Bild 22.1



Bild 22.2

23. Skjut den röda låsenheten K (bild 23.1) uppåt och dra grinden mot dig för att öppna. Grinden glider i metallskenan och viker sig utåt.

Observera att inga fingrar kommer i kläm när grinddörren viker sig utåt.



Bild 23.1

Anvisningar för att stänga grindarna

24. Skjut ihop grindarna tills de är uträtade och står i linje med metallskenan i sängramen.

Observera att inga fingrar kommer i kläm när grindarna stängs.

Skjut den röda låsenheten K nedåt för att låsa grinden i den uträtade positionen.

25. Skjut de röda låsenheterna I åt höger och J uppåt samtidigt för att stänga låset mellan grindarna.

26. Placera den tvärgående låsbalken H över grindarna så att den ligger i träkonsollerna på gavelbenen och med metallhakarna på grindarnas insida (se bild 26.1 och 26.2).

Tryck in de röda knapparna i konsollerna för att låsa fast låsbalken.

Med låsbalken blir grindarna helt stabila och är ej möjliga att öppna från insidan.

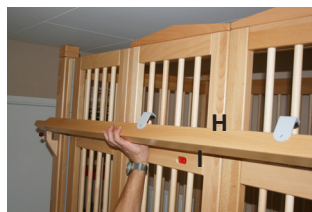


Bild 26.1



Bild 26.2



Bild 26.3

Skötselråd för inkontinensöverdrag till madrassen

Inkontinensöverdraget maskintvättas i 95°C. Klorblekmedel får ej användas. Tål alla vanliga rengöringsmedel, även fläckborttagning med bensin. Kan torktumlas på låg värme. Överdraget får ej strykas.

Tekniska specifikationer

Höjd spjålsidor	70 cm / 98 cm / 135 cm / 170 cm
Totalhöjd från golv	111 cm / 139 cm / 176 cm / 211 cm
Totalmått bredd x längd	90x170 cm / 90x200 cm / 100x200 cm
Hannah 170 cm	90x200 cm / 100x200 cm
Maxhöjd med lyft och hjul	132,5 cm
Ligghöjd minimum	55 cm
Ligghöjd maximum	95 cm
Max brukarvikt	150 kg

Sängen Hannah

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 33 B
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

KAYSERBETTEN
Rieper Strasse 12
296 83 Dorfmark

Tel: +49 5163 / 6595
Fax: +49 5163 / 2076

info@kayserbetten.de
www.kayserbetten.de


Pflegebetten für Kinder