

Bruksanvisning **Olaf**



Tillhör säng med serienummer:

MAYDAY AID


Pflegebetten für Kinder

Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Olaf.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa skötselråden, så hoppas vi att ni får mycket glädje och nytta av sängen.

Innehållsförteckning

Användningsområde	3-4
Kontroll vid leverans	5-6
Monteringsanvisning	7-9
Sänggrindarna	10-11
Säkerhetsregeln	12
Öppna och stänga grindarna	13
Elektriskt styrsystem	14
Anvisning för manöverdosan	15
Rengöring och rekonditionering	16
Garanti	17
Teknisk data	18
CE-märkning	18
Säkerhetsanvisningar	19-20
Kontaktinformation	21

Användningsområde

Sängen Olaf är en säng (vårsäng) som ska användas av barn, ungdomar och vuxna.

Sängen får endast användas av en person under natten.

Sängen skall användas för att sova i.

Sängen skall inte användas som lekplats för om inte en vuxen är i närheten.

De två grindarna på Olaf sängens långsida kan öppnas och stängas på ett enkelt men säkert sätt.

Sängen kan höjas och sänkas för att underlätta vid förflyttning i och ur sängen men också för att uppnå en bra ergonomisk arbetställning, vid vård i sängen, för föräldrar och för annan vårdpersonal.

Olaf-sängen kan också beställas med ett "lågt inkliv", höjd 17 cm, se bild 1.




Bild 1

Kontroll vid leverans av Olaf

Sängen levereras i delar. Kontrollera att sängens alla delar finns med, samt förpackningen för eventuella skador innan sängen monteras. Nedan följer en beskrivning av de delar som medföljer i paketen.

Läs igenom hela bruksanvisningen innan ni börjar montera sängen.

1. Sänggavel, 2 st (med hjul)
2. Långsida mot vägg, 1 st
3. Grindar på långsida fram, 2 st
4. Underliggande balk, 1 st
5. (Ribbad sängbotten, ingår ej i standardutförande)
6. Manöverdosa, 1 st
7. Säkerhetsregeln
8. Fäste för säkerhetsregel
9. Låda med skruvar, se sidan 6 för mer detaljer.

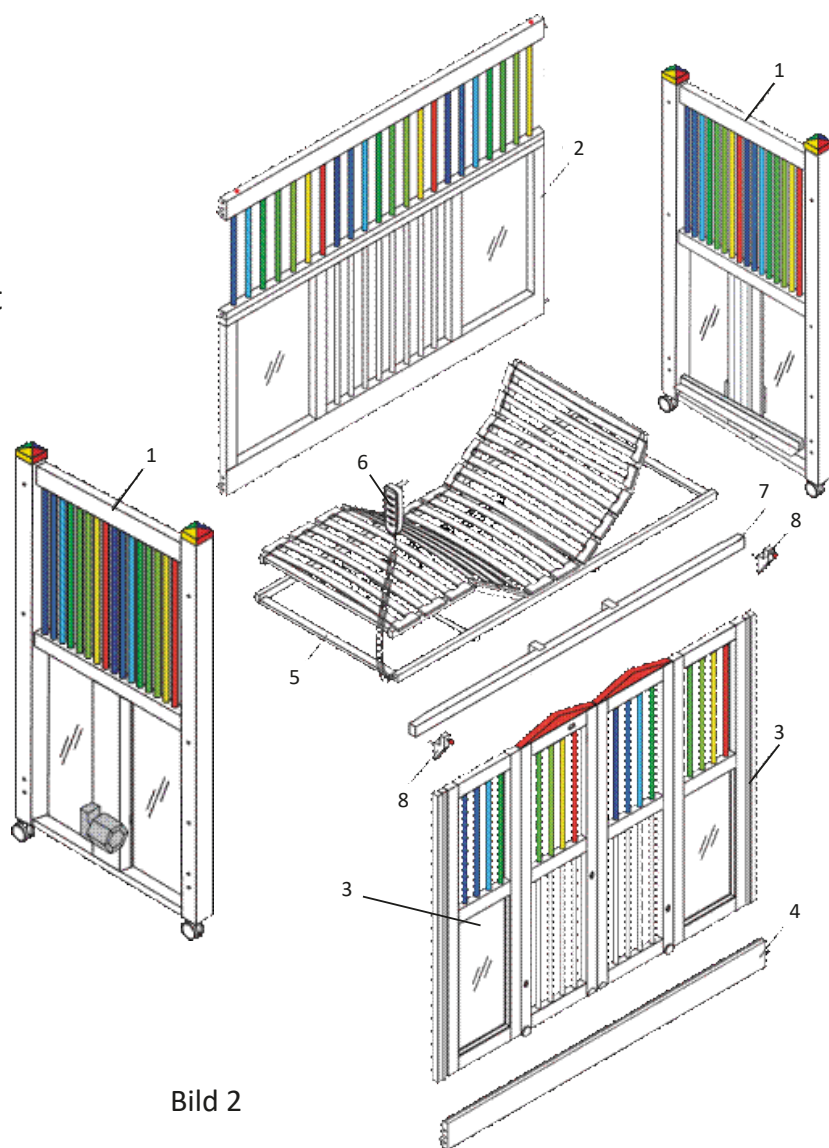

Låda med olika skruvar:

- A. 10 st Pinnskruv M8x 140mm
- B. 8 st Pinnskruv M8x105mm
- C. 12 st Sargsprint
- D. 12 st Hattmutter mässing
- E. 12 st Skruvar 7x70mm
- F. 12 st Skruvar 4x50mm
- G. 12 st Skruvar 4x25mm
- H. 1 st Insexnyckel
- I. 1 st Insexnyckel (mindre)
- J. 2 st Täckknapp
- K. 1 st Sladdhängare

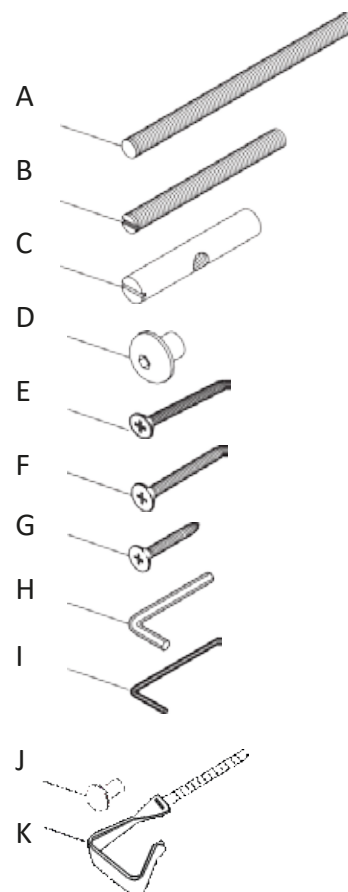


Bild 3

Man behöver en torxskruvmejsel ,
en stjärnskruvmejsel och en skruv-
mejsel vid monteringen av Olaf-
sängen.



Bild 4

Monteringsanvisning

Två, helst tre personer, behövs vid montering av sängen Olaf.


Lägg ut samtliga sängdelar på golvet.

Skydda sängdelarna genom att placera dem på filter eller mattor.


Börja med att montera hjulen. Lås samtliga hjul under monteringen.

Montera sargssprintarna (C)
i samtliga sängdelar.

Se till att skruvmejselspåret på sargsprinten
hamnar utåt för eventuell justering

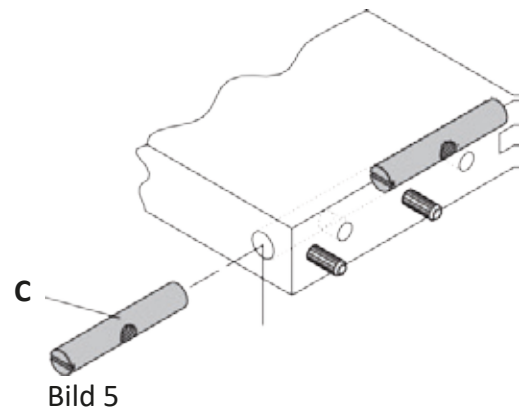

Skruva enbart först pinnskruven ett par varv
in i sargsprintarna så att pinnskruven får fäste.

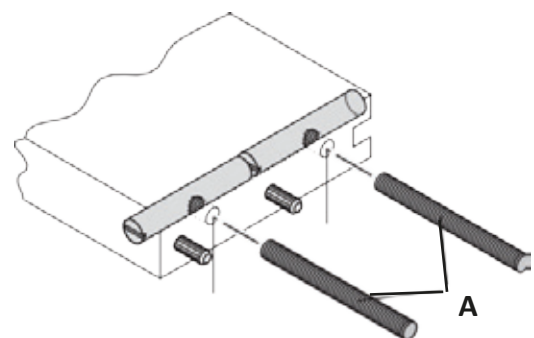


Håll sänggaveln upprätt (1) och skjut långsidan med träpluggar och pinnskruvar i de förborrade hålen. Skruva fast den underliggande balken (4) och baksidan (2) med mässinghattsmuttrarna, se bild 7. Vänta tills hela ramen är ihopmonterad innan den slutliga fastdragningen.



Bild 7

Håll fast pinnskruven och skruva fast mutterhatten i mässing, innan pinnskruvarna skruvas helt in.

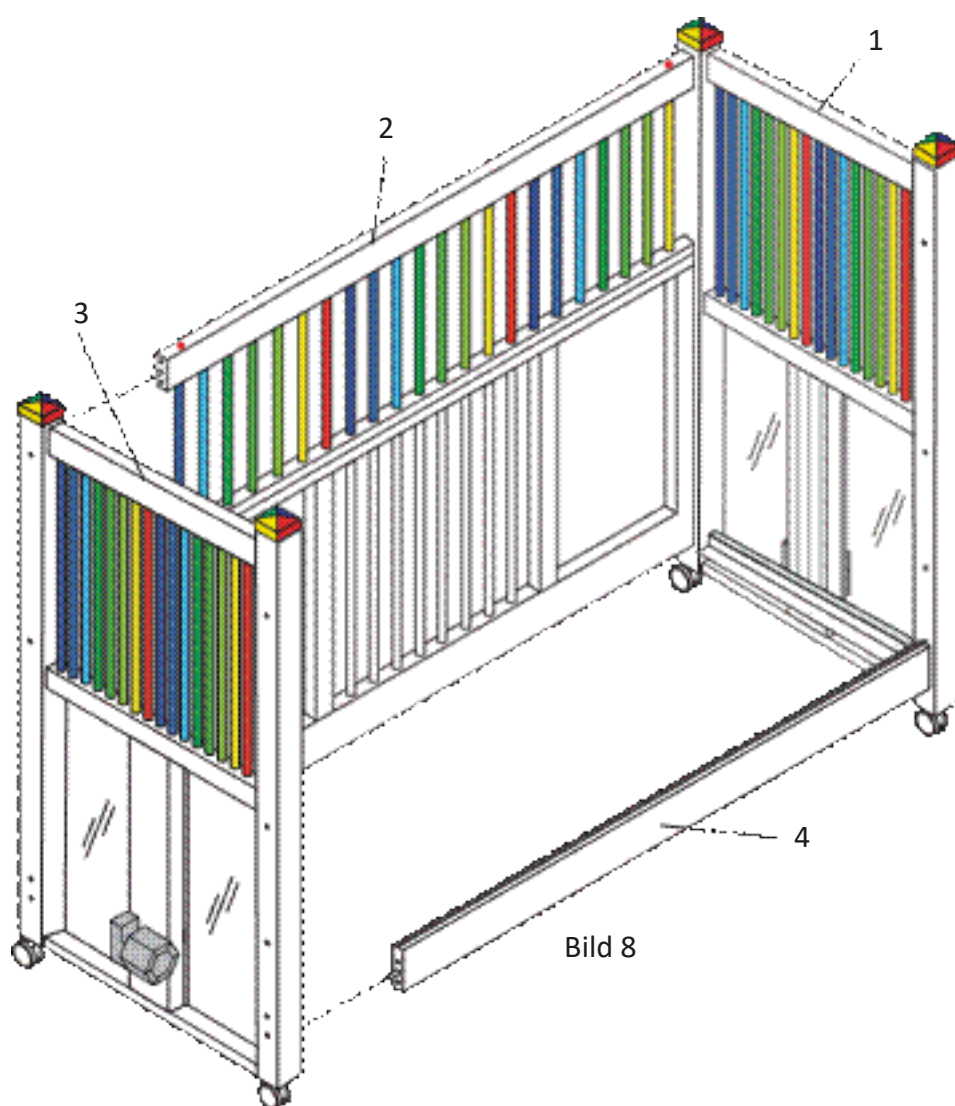

Montera sist den andra sänggaveln (3), lås hjulen så att inte sänggaveln inte rullar iväg och ramlar i golvet under monteringen.

När hela ramen är på plats, gå runt sängen och dra åt alla skruvarna ordentligt.

Placera sängbotten på sängens bärlister. Sängbottnarna är olika i sin funktion beroende på användarens behov.

- Tänk på att placera huvudsektionen respektive fotsektionen åt rätt håll!
- Koppla ihop kablarna med styrboxen. Därefter kopplas elkabeln till väggkontakten.
- Tryck/Hissa upp sängbotten till högsta läget.
- Montera fast sängbotten i sängramen underifrån med de fyra skruvarna 4 x 25 mm, se sidan 6 position G.



Bild 9

Montera grindarna, tänk på att vissa grindar är utrustade med en glid"knapp" på grindarnas nedre del, som skall ligga i spåret på nedre balkens översida då grindarna öppnas och vinklas utåt.

OBS! Bilderna 10-12 visar hur grindarna på sängen Lotte monteras men principen är detsamma för Olaf.

Testa åt vilket håll grinden öppnas innan den monteras fast i sängen, grindarna skall öppnas utåt, se bild 10.

Tänk på att grindarna är rörliga när de monteras. Stor klämrisk!

Håll fast grind-delarna vid monteringen för att undvika klämskador.

Skruva fast grinden i sänggaveln.
Montera nu mässinghatten direkt på pinnskruven (B, sidan 6).
Grindarna sätts fast i de gängade hålen på gavlarna.

Använd medföljande insex-nyckel, se bild 12.



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14

Olafsängar med skjutgrindar som glider i spår på nedre balken, bild 13-14.



Bild 15

På bilden ovan (bild 15) visas grindar som viks helt ut på en Hannahsäng. Sängen kan då enklare madrasseras.



Bild 16

På bild 16 visas Olafsäng med öppna grindar och med heltäckande madrassering.

Skruva fast säkerhetsregelsfästen (A) på var sida om sängen, se efter de förborrade hålen på yttre karmen.

Tänk på att säkerhetsregelns (B) hakar skall placeras på/över grindarna.

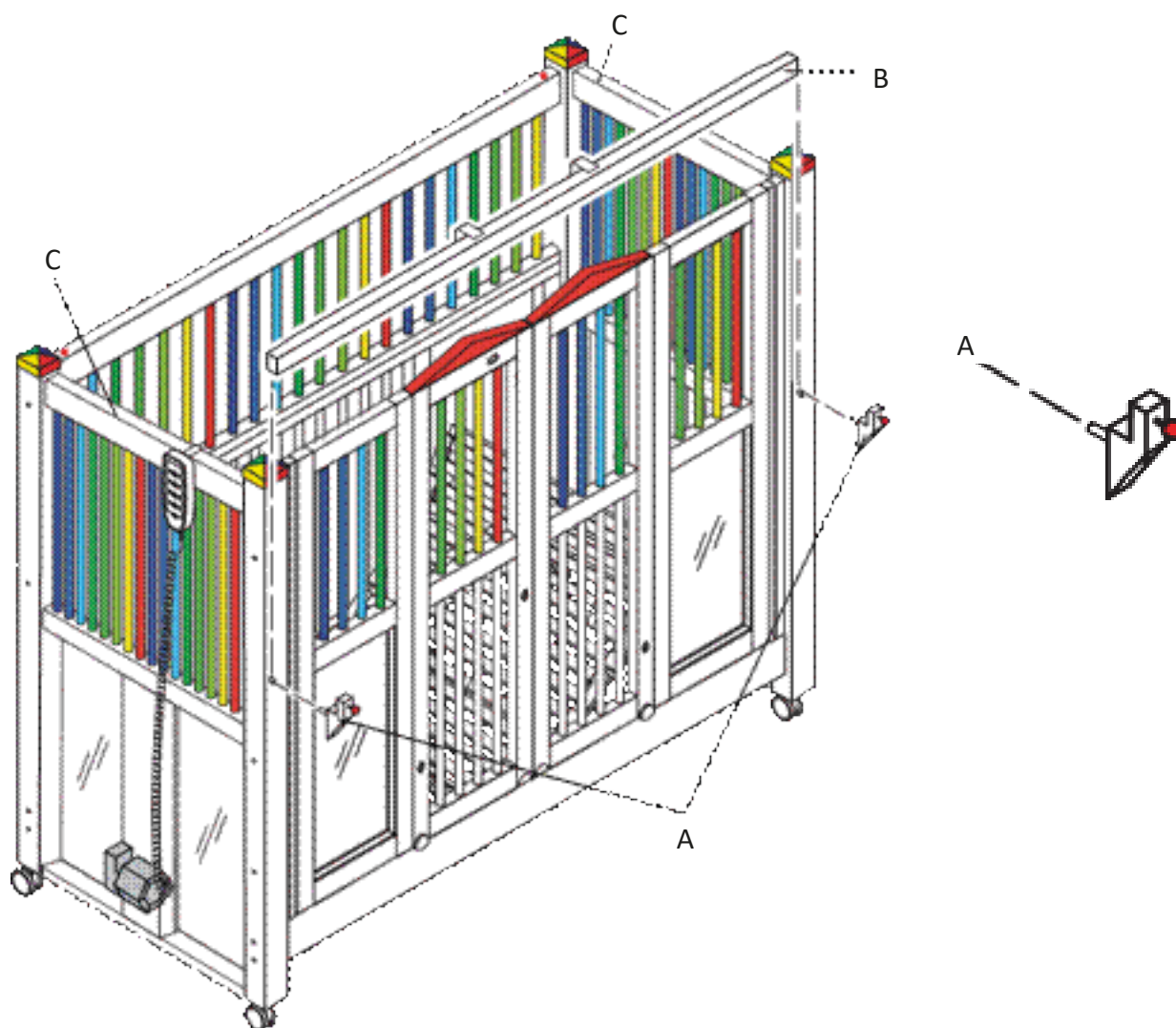


Bild 17

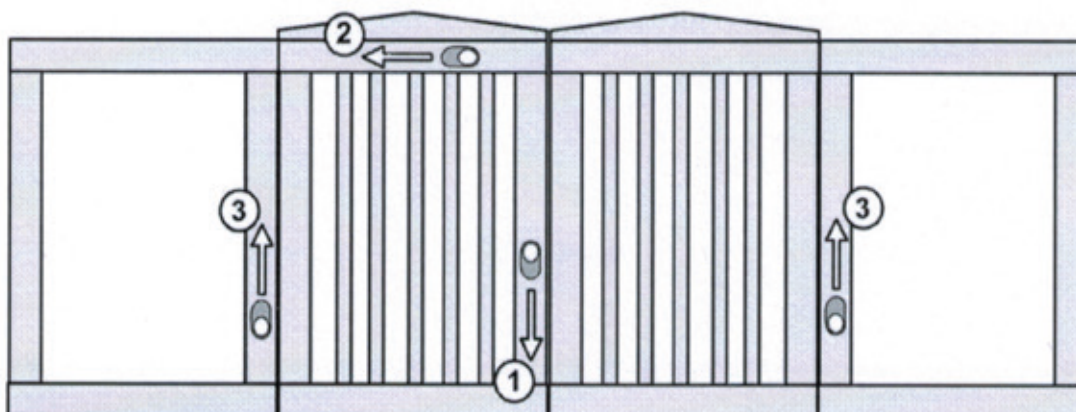


Bild 18


Öppna skjutgrindarna

1. Tryck in med höger hands finger i hålet och tryck ner låsspärren, håll kvar spärren i nertryckt läge.
2. Tryck, med vänster hands finger, den övre låsspärren till vänster.
3. Nu är dörrarna öppna och kan skjutas åt sidan när låsspärren skjuts uppåt.

Stänga skjutgrindarna

4. Tryck den högra grinden mot sängen så att den hamnar parallellt med sängens långsida. Tryck ner låsspärren (3).
5. Tryck den vänstra grinden mot sängen och tryck ner låsspärren (3)
6. Lås grindarna genom att skjuta spärren (1) uppåt och spärren (2) mot mitten.

OBS! Denna sida kan med fördel skrivas ut och placeras i närheten utav sängen så att alla kan ta del av informationen.

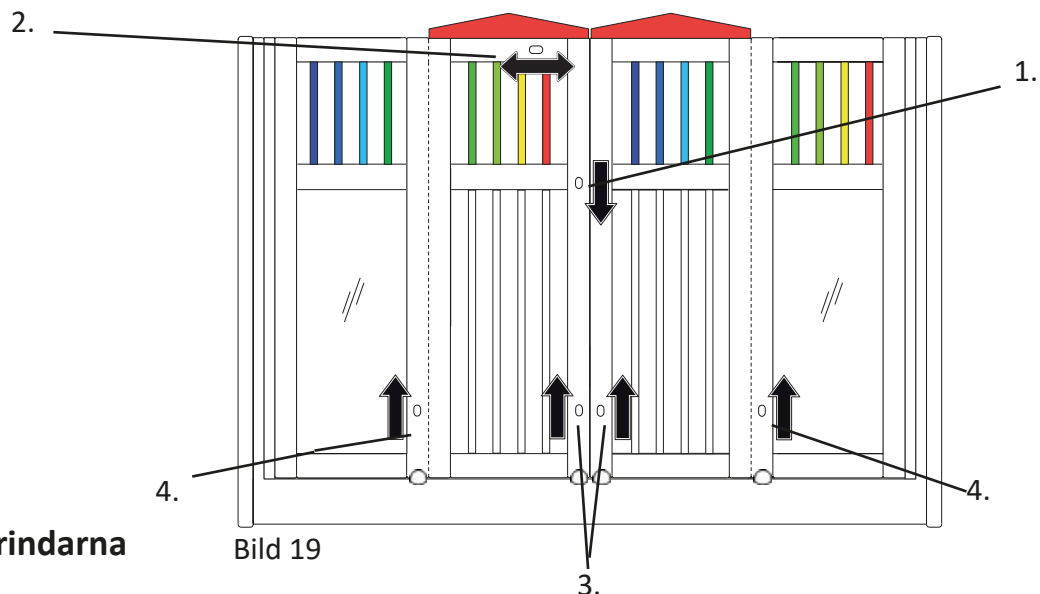

Öppna grindarna

1. Tryck in med fingret i hålet och tryck ner låsspärren, håll kvar spärren i nertryckt läge.
2. Tryck, med vänster hands finger, den övre låsspärren till vänster.
3. Nu är kan man öppna antingen höger eller vänster dörr genom att trycka upp låsreglaget på respektive sida.
4. För att kunna öppna hela grinden utåt trycker man upp låsreglaget på grindens sidor.

Stänga grindarna

1. Lyft upp fjäderlåset på sidorna och för yttre grinddelen mot sängen så att grinddelen placeras över med sängens långsida. Släpp ner låsspärren (4).
2. Tryck den vänstra grinddelen mot sängen och släpp ner låsspärren (4)
3. Lås mitten grindarna genom att skjuta spärren (3) uppåt och släpp låsspärren (3) i mitten.
4. Skjut ner låsspärren och tryck översta låset mot mitten.

OBS! Denna sida kan med fördel skrivas ut och placeras i närheten utav sängen så att alla kan ta del av informationen.

Elektriskt styrsystem

Det elektriska styrsystemet ser lite olika ut beroende på vilken sängbotten man valt till sin Olafsäng. Var noggrann med att montera sladdarna på rätt sätt för att undvika skador på enheten.

1. Anslut lyftpelarnas, högra och vänstra sidan.
2. Anslut manöverdosans kabel.
3. Montera kontaktskyddet över kontakterna.
4. Anslut motorns kontakt i närmaste vägguttag.



Bild 20

5. Lås upp manöverdosan, enligt "Anvisning för manöverdosan", sidan 16. Testa att höj- och sänkfunktionerna fungerar innan sängen används för att sova i.

OBS! Använd inte sängen om problem uppstår med det elektriska styrsystemet. Kontakta Mayday Aid AB omedelbart.

Varning!



Var uppmärksam på att inte överskrida den maximala användningstiden för motorenheten. Efter två minuters användning måste enheten vara avstängd i minst 18 minuter.

Anvisning för manöverdosan

Manöverdosans knapplås skall vara aktiverat när manöverdosan inte används för att förhindra skador och olyckor.

Lås upp manöverdosan genom att sätta den blå nyckeln i manöverdosans baksida och vrida nyckeln till symbolen med ett öppet lås. Manöverdosan är nu redo att användas.

För att låsa manöverdosan, vrid den blå nyckeln till symbolen med ett stängt lås.

Manöverdosans knappar kan nu inte användas, denna inställning rekommenderas då små barn finns i närheten.



Bild 21



Bild 21

1.A
Höja huvudsektionen

2.A
Höja fotsektionen

3.A
Höja både huvud- och
fotsektion samtidigt

4.A
Höja hela sängbotten/
madrass

1.B
Sänka huvudsektionen

2.B
Sänka fotsektionen

3.B
Sänka både huvud- och
fotsektion samtidigt.

4.B
Sänka hela sängbotten /
madrass

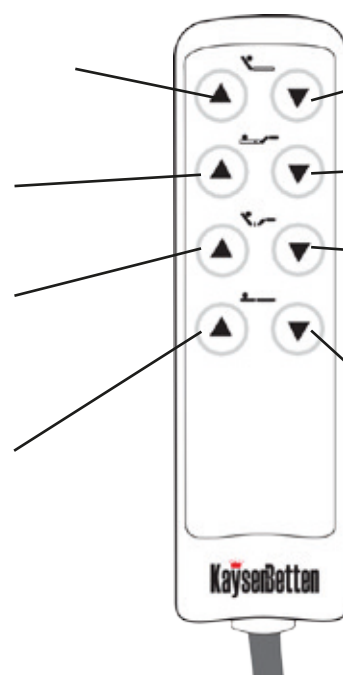


Bild 22

Rengöring och rekonditionering

VARNING!

Sängens elkontakt får inte vara ansluten till ett vägguttag vid rengöring.

Tvätta av sängen med flytande, neutrala rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel.
Torka av med torr trasa. Vid behov kan desinfektionsprit användas.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syror, baser eller lösningsmedel som t ex aceton eller thinner.

Använd inte scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas. Sängen får inte spolas eller läggas i vatten eller andra vätskor.

På en av lyftpelarna hittar man en märkningetikett, se nedan. Observera bland annat följande:

- Sängen får endast användas inomhus.
- Sängen skall sänkas ner när ett barn är i sängen.
- Höjdjustering får endast göras av vuxen person

Rengöring av manöverdosa

Tvätta manöverdosan ren med fuktad trasa och rengöringsmedel. Utsätt inte manöverdosan för högtryckstvätt eller ångrengöring.

Rekonditionering, fortsättning

Följande färger skall användas vid målningsförbättring.

RAL No	Färg
1023	Trafikgul
3000	Eldröd
5013	Koboltblå
5015	Himmelsblå
6027	Ljusgrön
6005	Mossgrön
6018	Gulgrön
6019	Grönvit
7037	Dammgrå
9016	Trafikvit

Garanti

Sängen Olaf har 3 års garanti.

Garantin gäller under förutsättning att rengöringsråden, rekonditionering- och säkerhetsanvisningarna följs och att sängen endast används till det sängen är avsedd för, se användningsområde sidan 3.

Fel, som omfattas av garantin, skall omedelbart meddelas till Mayday Aid AB.

Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Uppge alltid sängens serienummer.

Numren finns på etiketten som sitter på sängen, se bild 2.



KayserBetten GmbH & Co. KG
Rieper Str. 12
29683 Bad Fallingb. b. d.
Tel.: 05163 6595
Fax: 05163 2076
E-Mail: info@kayserbetten.de
www.kayserbetten.de

Pflegebetten für Kinder

Typ:

SN:

Sichere Arbeitslast: 170 kg
Max. Patientengewicht (incl. Zubehör): 150 kg
Sichere Arbeitslast des Aufrichters (optional): 80 kg
230V ~ 50/60 Hz, 150 W, IPX4, ED 15% max. 2







- Nur für den häuslichen Innenbereich!
- Bei unbeaufsichtigten Kindern muss das Bett in die tiefste Position gefahren werden!
- Verstellen der Betthöhe nur unter Aufsicht!
- Der klinische Zustand des Kindes ist zu beachten!

Bild 23

Teknisk data	Olaf 98	Olaf 135
Höjd spjälängens sidor, inkl hjul	113,5cm	135cm
Vikt (säng med lyftstativ)	130 kg	160 kg
Max brukarvikt	150 kg	150 kg
Ligghöjd med madrass KR3 trä, inkl hjul	min 41cm	max 101cm
Ligghöjd med madrass KR3 stål, inkl hjul	min 35cm	max 95cm
Hjul, diameter	10cm	
Max madrasshöjd	18 cm	
Driftsljud	< 50 dB	

CE-märkning

Sängen Olaf är CE-märkt och uppfyller därmed gällande regelverk. Märkningen gäller under förutsättning att sängen används till det ändamål den är avsedd för samt rengörs och kontrolleras enligt leverentörens föreskrifter.



Säkerhetsanvisningar

Spjäsängen måste stå på plant golv. Sängen måste vara utrustad med madrass efter sängens mått, madrassen får inte vara högre än 18 cm.

Barnet får ej lämnas ensamt i sängen då grindarna är öppna. Sängen måste vara i nedsänkt i dess nedersta läge om barnet ska krypa i eller ur, på egen hand.

Var uppmärksam på att elsladdar placeras på ett sådant sätt att de inte kan komma i kläm eller skadas på annat sätt. Var noga med att inte utsätta det elektriska styrsystemet, sladdar och kontakter för fukt. Kontrollera regelbundet sladdarna för skador för att undvika kortslutning.



Bild 24

Tänk på att madrass, spjälskydd, kuddar, täcke, lakan, lekmobiler och kramdjur skall vara barnsäkra.

Sängen får ej användas till annat än vad som anvisats i denna manual. Endast originaldelar får användas.

Säkerhetsanvisningar forts.

Det är inte tillåtet att vistas eller förvara saker under sängen, då kan det elektriska styrsystemet kan skadas. Var särskilt observant om det finns små barn eller husdjur i närheten.

Låt inte barn leka med manöverdosan.

Låt aldrig barn klättra på sängen.

Var uppmärksam på klämrisker från grindar och lyftsystem när sängen används.

Låt hjulen vara låsta förutom då sängen behöver flyttas. Sängen är tung och bör lyftas av minst två personer.



När barnet är ensam i sängen måste:

1. grindarna / långsidan vara stängda och låsta.
2. underredet vara i sitt nedersta läge.
3. manöverdosans knappar vara låsta.

Glöm inte att dra ur kontakten ur väggutaget innan sängen skall flyttas.

Sängen bör kontrolleras en gång per månad.

Kontrollera:

- Sängens funktioner och utrustningen till det elektriska styrsystemet.
- Dra alla skruvar så att sängen är stabil.
- Sängbotten, så att inga sprickor eller liknande har uppstått.

Sängen Olaf

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se

www.maydayaid.se

MAYDAY AID

Producent:

KAYSERBETTEN GmbH & Co. KG

Rieper Strasse 12
D-29683 Bad Fallingbommel

Tel: +49 5163-6595

Fax: +49 5163-2076

info@kayserbetten.de

www.kayserbetten.de


Pflegebetten für Kinder