



# VELA Salsa

MAYDAY AID

MODELL:

# 100/110/120/130/400

Manual nr. 105041



VELA Salsa 100



VELA Salsa 110



VELA Salsa 130



VELA Salsa 120



VELA Salsa 400

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1.0. INLEDNING</b>	<b>3</b>
<b>1.1. VARNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1.2. FELSÖKNING</b>	<b>5</b>
<b>1.3. ETIKETTER PÅ STOLEN</b>	<b>6</b>
<b>1.4. SÄKERHET</b>	<b>7</b>
1.4.1. Användning	7
1.4.2. Transport	7
<b>1.5. GARANTI</b>	<b>7</b>
<b>1.6. UPPACKNING AV STOLEN</b>	<b>7</b>
<b>1.7. UNDERHÅLL</b>	<b>8</b>
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Ram	8
1.7.3. Dyna	8
1.7.4. Återvinningsguide	8
<b>1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING</b>	<b>8</b>
<b>1.9. ANVÄNDARMANUAL</b>	<b>9</b>
1.9.1. Montera ryggstödet	9
1.9.2. Höjdinställning med grepp	9
1.9.3. Höjdinställning med grepp (Salsa 130 och 400)	9
1.9.4. Justera sitsens vinkel (Salsa 100, 110 och 120)	9
1.9.5. Justera sitsens vinkel (Salsa 130 och 400)	10
1.9.6. Broms	10
1.9.7. Justera rygghöjd	10
1.9.8. Justera ryggvinkeln	10
1.9.9. Ställa in armstöd, höjd	11
1.9.10. Ställa in armstöd, bredd	11
1.9.11. Snurr /Rotation (tillval)	11

## 1.0. INLEDNING

### KÄRA KUND!

Grattis till din nya VELA arbetsstol! Vi hoppas att du kommer ha glädje av din stol varje dag. Denna bruksanvisning ger information om justering, drift och underhåll av din stol.

### Viktigt!

Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Denna manual finns också tillgänglig på Mayday Aids webbplats: [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se) där du också kan hitta mer information.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via mail eller telefon.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

### MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35  
434 39 Kungsbacka  
Sverige  
Tel +46 0300 569700  
[www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)      [info@maydayaid.se](mailto:info@maydayaid.se)

## 1.1. VARNINGAR





Användning	Vid allergisk reaktion, sluta använda stolen och kontakta läkare
Användning	Använd endast originalreservdelar från VELA
Användning	Gör inga ändringar av tillbehören som medföljer stolen
Användning	Använd endast stolen för det avsedda ändamålet
Användning	Justera sitsvinkeln och ryggstödsvinkeln medan användaren sitter i stolen och användarens fötter är placerade på golvet
Användning	Ha alltid stol bromsad på när du skall sätta dig ner eller ställa dig upp
Användning	Använd aldrig stolen på ojämna ytor eftersom stolen blir instabil
Användning	Underhåll, utom rengöring, bör alltid utföras av en utbildad tekniker
Användning	Utför aldrig underhåll av arbetsstolen medan stolen används
Användning	Följ alltid rekommenderade underhålls- och rengöringsinstruktioner
Användning	Arbetsstolens funktioner skall vara anpassade för användaren. Endast utbildade yrkesverksamma bör justera stolen
Användning	OBS! Det finns risk för att skada eller klämma fingrarna i rörliga delar
Kvävningsrisk	Kvävningsrisk - smådelar! Låt aldrig barn leka med stolen!

## 1.2. FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak och problemlösning
Manuell höjdjustering fungerar inte	Det är för mycket last eller ojämn belastning på stolen. Försök justera höjden utan att sitta i stolen. Om detta inte fungerar är gaspatronen defekt och bör bytas ut. Kontakta Mayday Aid.
Bromsfunktionen fungerar inte	Bromsen är inte aktiverad. Se avsnitt 1.9.6
Armstödet är löst	Dra åt skruvarna hårt
Stolen rullar dåligt	Rengör hjulen från smuts, hår, damm och liknande.
Bromsstång eller chassi är i vägen när jag rör mig i stolen	Du har en stol med snurrfunktion (sitsrotation) Roter för att hamna rätt i stolen.

Om ovanstående inte löser ditt problem, kontakta MAYDAY AID

## 1.3. ETIKETTER PÅ STOLEN

Varning	Risk för klämskador: Håll händer och fingrar borta från rörliga delar	
Etiketter	60 x 22,5 mm	

Etiketter på stolen ska läsas på ett avstånd av ca. 40 cm under normala dagsljusförhållanden. För etiketter relaterade till stolens funktion, se avsnitt 1.9.

#### 1.4. SÄKERHET

Denna stol är CE-märkt och uppfyller gällande EU-föreskrifter.

Stolen är tillverkad av:  
VELA, Gøteborgvej 8-12,  
9200 Aalborg SV, Danmark.

##### 1.4.1. ANVÄNDNING

Denna stol avsedd för att användas inomhus för sittande och endast för privat bruk.

:: Stolen är inte byggd för att stå på

:: Hjulbromsen måste alltid aktiveras när du sitter eller står upp

Alla varianter av denna stol är testade och godkända för en maximal belastning på 125 kg.

##### 1.4.2. TRANSPORT

Använd alltid stolens broms när du transporterar stolen i bil, flygplan eller något annat transportmedel. Stolen är inte godkänd för användning som passagerarsäte i något transportmedel och får absolut inte användas på detta sätt.

**Stolen är utformad för att transporteras under följande miljöförhållanden:**

Temperatur: - 20 ° C till + 60 ° C

Fuktighet: 15-95%

Låt stolen stå i 24 timmar före användning om den har lagrats under - 10 ° C.

#### 1.5. GARANTI

VELA beviljar rätt till anspråk enligt tillämplig lag i det land där stolen har förvärvats. Reklamationsrätten gäller endast vid användning av originaldelar och tillbehör, samt anpassningar gjorda av förskrivare eller hjälpmedelstekniker.

Obs! Om ett exklusivt avtal har ingåtts direkt med VELA, gäller detta!

VELA åtar sig inget ansvar för skador på produkten eller användaren orsakade av:

:: Transport

:: Felanvändning

:: Normalt slitage

:: Felaktig användning

:: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är VELAs originalprodukter.

:: Justeringar gjorda av obehörig servicetekniker.

#### 1.6. UPPPACKNING AV STOLEN

Stolen transporteras i miljövänliga och återvinningsbara förpackningar.

Vid defekter eller transportskador på stolen, vänligen kontakta MAYDAY AID direkt. I sådana fall ska du inte försöka använda stolen eller reparera den själv.

## Vid leverans har du fått:

:: VELA-medicinteknisk arbetsstol/  
ståstödsstol

:: Användarmanual

:: Tillbehör, enligt beställning

Obs! Se punkt 1.9.1 för korrekt fastsättning av ryggstödet.

### 1.7. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar en årlig inspektion av stolen för att identifiera defekta eller slitna delar. Alla löstagbara och/eller justerbara delar ska dras åt regelbundet.

#### 1.7.1. HJUL

Vi rekommenderade att du regelbundet kontrollerar hjulen och tar bort eventuell smuts, hår och damm som hindrar hjulen för att rulla lätt.

#### 1.7.2. METALLRAM

Rengör med ljummet vatten och tillsätt eventuellt ett miljövänligt pH-neutralt rengöringsmedel om det behövs.

#### 1.7.3. DYNA

**Tyg:** Rengör med kemisk rengöring, möbeltvätt eller med vatten och en fuktig trasa.

**Syntetiskt tyg eller läder:** Rengör med vatten eller mild tvål och en fuktig trasa.

**Läder:** Rengör genom att dammsuga med en mjuk borste. Undvik att använda rengöringsmedel.

### 1.7.4. ÅTERVINNINGSGUIDE

Din VELA-stol kan återanvändas av en annan person när du inte längre behöver den så länge stolen har genomgått service av en tekniker i förväg.

Stolens livslängd är fem år vid regelbunden och korrekt användning så länge VELA, din VELA-leverantör eller en utbildad tekniker utför en årlig serviceinspektion med byte av slitna delar.

### 1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANtering

Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Produkten skall kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Korrekt återvinning hjälper till att förhindra negativa effekter på miljön och människor.


Obs: På [www.vela.dk](http://www.vela.dk) kan du hitta rengöringsinstruktioner för alla våra typer av standardklädsel.



## 1.9. ANVÄNDARMANUAL

Funktioner kan vara olika på arbetsstolar/ståstödsstolar enligt överenskommelse vid beställning.

Byte av gasfjädern får endast göras av tekniker eller av person med relevant utbildning.

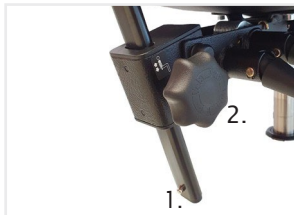

### 1.9.1. SÄTTA FAST RYGGSTÖDET

Tryck in fjäderlåset (1) och skjut ryggstaget genom hålet i ryggstödshållaren. Dra fast skruven (2) efteråt.

Obs: Ryggstödsstaget ska föras genom hålet så mycket att fjäderlåset ser till att ryggstödet inte kan dras upp ur ryggstödshållaren.



### 1.9.2. HÖJDINSTÄLLNING MED HANDTAGSGREPP

Justera höjden genom att dra det främre handtagsgreppet på höger sida uppåt.



### 1.9.3. HÖJDINSTÄLLNING MED HANDTAGSGREPP (SALSA 130 OCH 400)

Ställs in genom att man drar i handtagsgreppet på vänster sida.



### 1.9.4. JUSTERA SITTVINKELN


Dra det mittersta handtagsgreppet på höger sida - uppåt. Släpp handtaget då rätt sittvinkel uppnåtts.

**Obs!** Inställning av sitt- och ryggvinkeln bör alltid göras med bägge fötterna placerade på golvet.



#### **1.9.5. JUSTERA SITTVINKELN (SALSAS 130 OCH 400)**

Dra i handtagsgreppet på höger sida - uppåt.

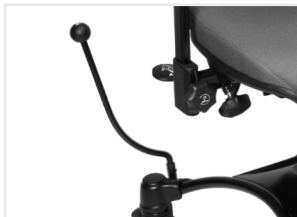

#### **1.9.6. CENTRALBROMS**

Arbetstolen/Ståstödsstolen Salsa bromsas genom att bromshandtaget på sidan av stolen trycks framåt. Lås upp stolens hjul genom att föra bromshandtaget bakåt. Bromsen kan flyttas från höger till vänster sida. Lossa skruven nederst på bromsstången, ta bort plastknoppen från hålet på den motsatta sidan och sätt i bromsstången. Kom ihåg att skruva fast handtaget.



#### **1.9.7. JUSTERA RYGGHÖJDEN**

Lossa på skruven på ryggstödsfästet och justera in höjden på ryggstödet. Kom ihåg att dra åt skruven igen.



#### **1.9.8. JUSTERA RYGGVINKELN**

Dra det bakre handtagsgreppet, på höger sida, uppåt. Använd bara handtaget när någon sitter i stolen - eftersom ryggstödet annars vinklas framåt.



#### **1.9.9. JUSTERA ARMSTÖD, HÖJD**

Lossa skruven på armstödsstaget lossas och ändra höjden på armstödets. Kom ihåg att dra åt skruven igen.



#### **1.9.10. JUSTERA ARMSTÖDEN I BREDD**

Lossa skruvarna under sitsen och justera armstödsbredden genom att dra armstöden in eller ut. Kom ihåg att dra åt skruven då armstöden är placerade i rätt bredd.



#### **1.9.11. SNURR / ROTATION (TILLVAL)**

Rotera sitsen genom att dra det främre greppet på vänster sida uppåt.

