



VELA Salsa

MODELL:

100/110/120/130/400

Manual nr. 105041



VELA Salsa 100



VELA Salsa 110



VELA Salsa 130



VELA Salsa 120



VELA Salsa 400

ISO 9001
ISO 14001

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0. INLEDNING	3
1.1. VARNINGAR	4
1.2. FELSÖKNING	5
1.3. ETIKETTER PÅ STOLEN	6
1.4. SÄKERHET	7
1.4.1. Avsedd användning	7
1.4.2. Transport	7
1.5. GARANTI	7
1.6. UPPACKNING AV STOLEN	7
1.7. UNDERHÅLL	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Underrede	8
1.7.3. Dynor	8
1.7.4. Återvinningsguide	8
1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING	8
1.9. ANVÄNDARMANUAL	9
1.9.1. Montera ryggstödet	9
1.9.2. Höjdinställning med reglage	9
1.9.3. Höjdinställning med reglage (Salsa 130 och 400)	9
1.9.4. Ställa in sitsvinkeln	9
1.9.5. Ställa in sitsvinkeln (Salsa 130 och 400)	10
1.9.6. Broms	10
1.9.7. Ställa in rygghöjd	10
1.9.8. Ställa in ryggvinkeln	10
1.9.9. Ställa in armstöd, höjd	11
1.9.10. Ställa in armstöd, bredd	11
1.9.11. Rotation	11

1.0. INLEDNING

KÄRA KUND!

Grattis till din nya VELA-stol! Vi hoppas på att du kommer att ha god användning av din stol varje dag. Denna bruksanvisning ger användbar information om justering, drift och underhåll av din stol.

Viktigt

Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Denna manual finns också tillgänglig på VELA:s webbplats: www.vela-stolar.se, där du också hittar annan relevant information.

Om du har frågor, upplever fel eller något händer oavsiktligt, vänligen kontakta din VELA-leverantör.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Vermund Larsen Sverige AB

C/O RSM Göteborg KB
Bohusgatan 15
411 39 Göteborg
Sverige
www.vela-stolar.se

1.1. VARNINGAR



Användning	Vid allergisk reaktion, sluta använda stolen och kontakta läkare
Användning	Använd endast originalreservdelar från VELA
Användning	Gör inga ändringar av tillbehören som medföljer stolen
Användning	Använd endast stolen för det avsedda ändamålet
Användning	Justera endast sitsvinkeln och ryggstödvinkeln under tiden användaren sitter i stolen och användarens fötter är på golvet
Användning	Ha alltid stol bromsad på när du sätter dig eller står upp
Användning	Använd aldrig stolen på ytor med nivåskillnader eftersom stolen kan bli instabil
Användning	Underhåll utom rengöring bör alltid utföras av en utbildad tekniker
Användning	Utför aldrig underhåll på stolen medan den används
Användning	Följ alltid rekommenderade underhålls- och rengöringsinstruktioner
Användning	Stolens funktioner är avsedda för användaren. Endast användaren eller utbildade yrkesverksamma bör justera stolen medan användaren sitter i den
Användning	Risk för att skada eller klämma fingrarna i rörliga delar. Använd därför inte stolen om någon rör stolen under sitsen
Kvävningsrisk	Kvävningsrisk - smådelar. Låt aldrig barn leka med stolen, eftersom små delar kan tas bort

1.2. FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak och lösning
Manuell höjdjustering fungerar inte	Det är för mycket last eller ojämn belastning på stolen. Försök justera höjden utan att sitta i stolen. Om detta inte fungerar är gaspatronen defekt och bör bytas ut. Kontakta din VELA-leverantör
Bromsfunktionen fungerar inte	Bromsen är inte aktiverad. Se avsnitt 1.9.6
Armstödet är löst	En av handskruvarna kan vara lös. Dra åt handskruven
Stolen rullar dåligt	Hjulen är blockerade. Rengör hjulen från smuts och liknande.
Bromsstång eller chassi är i vägen när jag rör mig i stolen	Du har en stol med sätesrotation. Använd stolrotationens reglage för att rätta ut stolen. Se avsnitt 1.9.11
Ryggstolpen glider ned	Dra åt handjusteringen ordentligt som visas i punkt 1.9.1. Du kan dra åt skruven hårt utan att skada produkten

Om ovanstående inte löser ditt problem, bör du kontakta din VELA-leverantör.

1.3. ETIKETTER PÅ STOLEN

Varning	Risk för klämskador: Håll händer och fingrar borta från rörliga delar 
Etiketter	60 x 22,5 mm De sista 6 siffrorna är produktens identitetssiffror (ID-nummer): <Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Adress> <Webpage>   UDI: (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) XXXXXXX CE MEDICO <Safe working load> <Production date/order no.>

Etiketter på stolen ska läsas på ett avstånd av ca. 40 cm under normala dagsljusförhållanden. För etiketter relaterade till stolens funktion, se avsnitt 1.9.

1.4. SÄKERHET

Denna stol är CE-märkt och uppfyller gällande EU-föreskrifter.

Stolen är tillverkad av:
VELA, Gøteborgvej 8-12,
9200 Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. AVSEDD ANVÄNDNING

Denna anordning är avsedd att stödja en användare i sittande ställning när han eller hon utför dagliga aktiviteter inomhus, inklusive arbetsaktiviteter.

:: Stolen är inte byggd för att stå på

:: Hjulbromsen måste alltid aktiveras när du sitter eller står upp

Alla varianter av denna stol är testade och godkända för en maximal belastning på 125 kg. För optimal användning är stolens rekommenderade användarvikt 40-110 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Använd alltid stolbromsen när du transporterar stolen med bil, flygplan eller något annat transportmedel. Stolen är inte godkänd för användning som passagerarsäte i något transportmedel och får inte användas på detta sätt.

Stolen är utformad för att transporteras under följande miljöförhållanden:

Temperatur: - 20 ° C till + 60 ° C
Fuktighet: 15-95%

Låt stolen stå i 24 timmar före användning om den har varit i en temperatur under - 10 ° C.

1.5. GARANTI

VELA beviljar rätt till anspråk enligt tillämplig lag i det land där stolen har förvärvats. Reklamationsrätten gäller endast vid användning av originaldelar och tillbehör, samt anpassningar gjorda av proffs.

Obs: om ett exklusivt avtal har ingåtts direkt med VELA, gäller detta!

VELA åtar sig inget ansvar för skador på produkten eller användaren orsakade av:

:: Transport

:: Felanvändning

:: Normalt slitage

:: Felaktig användning

:: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är VELAs originalprodukter

:: Justeringar gjorda av obehöriga servicetekniker

1.6. UPPACKNING AV STOLEN

Stolen transporteras i miljövänliga och återvinningsbara förpackningar.

Vid defekter eller transportskador på stolen, vänligen kontakta din VELA-leverantör direkt. I sådana fall ska du inte försöka använda stolen eller reparera den själv.

Vid leverans har du fått:

- :: VELA-stol
- :: Bruksanvisning

Obs: se punkt 1.9.1 för korrekt montering av ryggstödet.

1.7. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar en årlig inspektion av stolen för att identifiera defekta eller slitna delar. Alla löstagbara delar ska dras åt regelbundet. Du hittar olika guider på www.vela-stolar.se.

1.7.1. HJUL

Vi rekommenderade att du regelbundet kontrollerar hjulen och tar bort eventuell smuts etc.

1.7.2. UNDERREDE

Rengör med ljummet vatten och tillsätt eventuellt ett pH-neutralt tvättneddel om det behövs.

1.7.3. DYNOR

Tyg: Rengör med kemisk rengöring, med möbeltvätt eller med vatten med en fuktig trasa.

Syntetiskt tyg eller läder: Rengör med vatten eller mild tvål och en fuktig trasa.

Läder: Rengör genom att dammsuga med en mjuk borste. Undvik att använda tvättmedel.

Obs: På www.vela-stolar.se kan du hitta rengöringsinstruktioner för alla våra typer av standardklädsel.

1.7.4. ÅTERVINNINGSGUIDE

Din VELA-stol kan komma att användas av en annan person när du inte längre behöver den efter det att stolen genomgår en service av en tekniker innan.

Stolens livslängd är fem år vid regelbunden och korrekt användning så länge VELA, din VELA-leverantör eller en utbildad tekniker utför en årlig serviceinspektion med byte av slitna delar.


1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING

Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Därför måste produkten kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och inte tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att förhindra negativa effekter på miljön och människor.

1.9. ANVÄNDARMANUAL

Merknad: Funktioner kan vara olika på stolar efter avtal med köpare.

Att byta ut gasfjädern får endast bytas ut av tekniker från VELA eller av en annan tekniskt utbildad person.

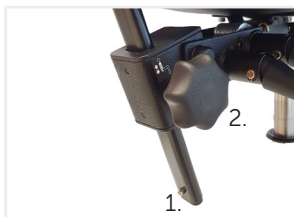

1.9.1. MONTERA RYGGSTÖDET

Låsfjädern (1) pressas inn och ryggstaget förs ner genom hålet i ryggstödsfästet. Dra fast handskruven (2) efteråt.

Obs: Ryggstödsstaget ska föras rakt igenom hålet så låsfjädern går ut och låser. Se till att ryggstödet inte kan dras upp igen.



1.9.2. HÖJDINSTÄLLNING MED REGLAGE

Ställs in genom att man drar det främre greppet uppåt på höger sida, samtidigt som man reser sig upp från sitsen.



1.9.3. HÖJDINSTÄLLNING MED REGLAGE (SALSA 130 OCH 400)

Ställs in genom att man drar uppåt i greppet på vänster sida, samtidigt som man reser sig upp från sitsen.



1.9.4. STÄLLA IN SITSVINKELN


Ställs in genom att man drar det mittersta handtaget uppåt på höger sida, samtidigt som man reser sig upp från sitsen.

Obs: Inställning av ryggstöds- och ryggvinkeln bör alltid göras med båda fötterna på golvet.



1.9.5. STÄLLA IN SITSVINKELN (SALSA 130 OCH 400)

Ställs in genom att man drar uppåt i grepp-reglaget på höger sida och lutar sig framåt eller bakåt.

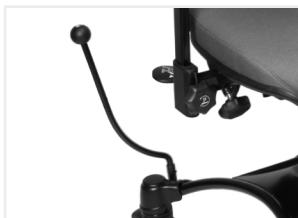

1.9.6. BROMS

VELA Salsa bromsas genom att bromsspaken på sidan av stolen förs framåt. Lås upp stolen genom att föra tillbaka bromsspaken i upprätt position. Tänk på: Bromsspaken kan flyttas från hö respektive vän sida om man lossar skruven nederst på bromsspaken, tar bort plastknoppen från hålet på den motsatta sidan och sätter i bromsspaken. Kom ihåg att skruva fast bromsspaken.



1.9.7. STÄLLA IN RYGGHÖJD

Ställs in genom att skruven bak på ryggstödsfästet lossas och höjden på regleras. Kom ihåg att dra åt skruven igen.



1.9.8. STÄLLA IN RYGGVINKELN

Ställs in genom att man drar det bakersta handtaget på höger sida uppåt.

Använd bara handtaget när någon sitter i stolen - eftersom ryggstödet annars kommer att luta framåt.



1.9.9. STÄLLA IN ARMSTÖD, HÖJD

Ställs in genom att skruven på armstödsfästet lossas och höjden på armstöden regleras. Kom ihåg att dra åt skruven igen.



1.9.10. STÄLLA IN ARMSTÖD, BREDD

Ställs in genom att man lossar skruven under sitsen och reglerar armstödsbredden genom att dra ut armstöden. Kom ihåg att dra åt skruven igen.



1.9.11. ROTATION

Sitsen kan rotera om man drar det främre greppreglaget uppåt på vänster sida.



Återförsäljare:

MAYDAY AID

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35,
Kungsbacka 434 39,
Sverige
info@maydayaid.se
0300569700
www.maydayaid.se