

Recaro Monza Nova Reha

TESTED &
APPROVED
ECE - R 44/04
RECARO



RECARO
15-36 kg

Det säkra sättet för barn att färdas i bil



Recaro Monza Nova Reha säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35,
434 39 Kungsbacka



RECARO Monza Nova Reha

- det säkra sättet att färdas i bil




Vridplattan gör det enkelt att lyfta barnet i och ur bilbarnstolen.

Recaro Monza Nova Reha är en lätt och välutrustad, framåtvänd bilbarnstol för att ge barn med särskilda behov, det stöd dem behöver under färd i bil. Bilbarnstolen är utformad för att möta de högsta kraven på säkerhet och är godkänd enligt ECE-R44/04 för viktclass 15-36 kg.

Säker och enkel montering

RECARO har i samarbete med Thomas Hilfen tagit fram olika bilbarnstols-modeller för barn med funktionshinder. Recaro Monza Nova Reha finns både med och utan seatfix-fästen. Seatfix-fästen gör det möjligt att snabbt förankra bilbarnstolen i bilsätet om bilen är utrustad med ISOFIX-fästen.

Bilbarnstolen Recaro Monza Nova Reha väger endast 6 kg vilket gör den lätt att lyfta i och ur olika bilar eller för att ta med på semesterresan.

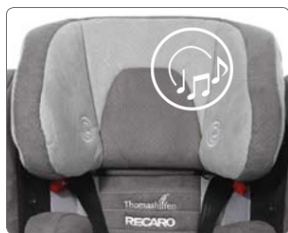


Inbyggda högtalare



Sittdjupsförlängning



Underarmstöd / Bord

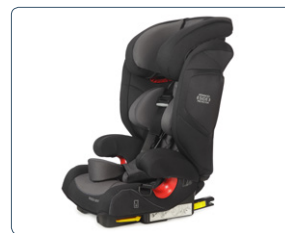

Bilbarnstol med seatfix

Lätt att justera

Nackstödet kan enkelt förlängas i olika höjdlägen så att bilstolen växer i takt med barnet. Vinkeln på huvudstödet kan ändras så det blir så säkert och bekvämt som möjligt för det sovande barnet. I huvudstödet finns en liten luftkudde som kan pumpas upp för att anpassa stödet för bakhuvudet.



Recaro Monza Nova Reha har förstärkta sidostöd för att ge bästa skydd för både bålen och höftpartiet vid en eventuell sidokollision.

Bilbarnstolens 5-punktsbälte, tillsammans med ett vadderat stöd för bäckenet, positionerar barnet väl i bilbarnstolen. 5-punktsbältet skall alltid användas tillsammans med bilens 3-punktsbälte under färd.

Vridplattan gör det möjligt att rotera stolen och förenklar förflyttningen till och från bilbarnstolen. Recaro Monza Nova Reha kan utrustas med bord, fotstöd, sitsdjupsförlängning, sittskil och abduktionsblock för att ge barnet bästa möjliga stöd och komfort, allt för att göra bilresan till en härlig upplevelse!

Smart design

Den mjuka klädseln, svart eller grå, är av högsta kvalitet och är lätt att ta av vid rengöring, maskintvättas i 30°C. Textilmaterialet i stolens klädsel och specialstöd är utvecklade så att luft alltid ska kunna cirkulera, det gör stolen extra skön att sitta i, såväl på vintern som på sommaren. Ett roligt och lugnande inslag för barnet är de inbyggda högtalarna i nackstödet. Kontakten finner du i fickan på bilstolens sida.

Tekniska specifikationer		
Sittdjup	30 cm	
Sittdjup med sittdjupsförlängning	43 cm	
Sittbredd	fram till 27 cm	bak till 24 cm
Sittbredd med sittskil (inre)	20 cm	
Ryggstödet höjd	60 - 77 cm	
Utvändiga mått	54 x 66 x 42 cm	
Stolens vikt (med seatfix)	ca 6 kg	(ca 7 kg)
Barnets vikt	min 15 kg	max 36 kg



Recaro Monza Nova Reha säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se,

MAYDAY AID